

# ***Массажное кресло RT-6310***

***ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ***



Благодарим за выбор нашей продукции. Внимательно прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией, чтобы убедиться, что вы правильно используете продукт. Уделите особое внимание важным мерам предосторожности и сохраните это руководство для будущего использования.

Примечание: Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и описание данного продукта без дальнейшего уведомления. Сверьте цвет заказанного продукта.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

---

|   |    |
|---|----|
| Безопасность и обслуживание                 | 02 |
| Наименование и функции основных компонентов | 04 |
| Функции                                     | 05 |
| Правила эксплуатации                        | 06 |
| Технические характеристики                  | 14 |

## Безопасность и обслуживание

### 1. Основные меры предосторожности



- Не разрешайте детям прикасаться к подвижным частям кресла.
- Используйте хорошо заземленный источник питания, подходящий для данного кресла.
- Отсоедините кресло от источника питания после использования или перед чистой уборкой, чтобы избежать травм или поломок.
- Следуйте требованиям инструкции по эксплуатации.
- Не используйте не рекомендуемые дополнительные приспособления.
- Не используйте кресло вне помещения.
- Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя перед эксплуатацией.
- Запрещается использование продукта не по инструкции.
- Рекомендуется использовать кресло не более 20 минут за раз.
- Не используйте кресло, если кожаное покрытие повреждено или порвано.
- Не используйте кресло, если корпус поврежден.
- Не включайте кресло, если отверстие радиатора закрыто или засорилось.
- Не роняйте ничего на кресло.
- Не засыпайте во время пользования креслом.
- Не используйте кресло, если находитесь в нетрезвом состоянии или чувствуете недомогание.
- Используйте кресло только через час после еды.
- Если вы чувствуете дискомфорт во время массажа, сделайте интенсивность ниже или перестаньте пользоваться креслом.

### 2. Условия эксплуатации.

- Не используйте кресло под действием высоких температур и в помещениях с высокой влажностью, например в ванной.
- Не включайте кресло, если наблюдается перепад температур.
- Не используйте кресло в сильно загрязненных помещениях.
- Не используйте кресло в тесных помещениях и при недостаточной вентиляции.

### 3. Противопоказания к использованию кресла.

- Запрещено пользоваться креслом людям, страдающим остеопорозом.
- Запрещено пользоваться креслом людям, страдающим болезнями сердца или носящим электронное медицинское оборудование (например, кардиостимулятор).
- Не рекомендуется использование кресла, если у вас температура.
- Нельзя пользоваться креслом беременным женщинам и женщинам во время критических дней.
- Не рекомендуется использование продукта людям, страдающим кожными заболеваниями, либо имеющим повреждения кожи.
- Детям до 14 лет и людям с психическими заболеваниями разрешается пользоваться креслом только в сопровождении ответственных за них лиц.
- Нельзя пользоваться креслом, если вы чувствуете недомогание или имеются противопоказания врача.
- Запрещено использование кресла, если у вас влажная кожа.
- Людям нечувствительным к высоким температурам следует использовать кресло с осторожностью.

### 4. Меры безопасности.

- Проверьте, соответствует ли напряжение техническим характеристикам кресла.
- Не включайте массажное кресло влажными руками.

## Безопасность и обслуживание

- Во избежание повреждений или удара электрическим током не допускайте контакта кресла с водой.
- Не допускайте повреждения проводов и не меняйте микросхемы устройства.
- Пользуйтесь только сухой тряпкой для очистки электрических частей кресла, таких как выключатель и вилка.
- Во избежание травм рекомендуется находиться на расстоянии от массажного кресла во время отключения электричества на случай, если питание будет внезапно включено.
- Не используйте кресло, если имеются неисправности. Немедленно свяжитесь с местным представителем.
- Прекратите использование кресла, если почувствовали недомогание. Проконсультируйтесь с врачом.
- Данный продукт не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, или без опыта использования продукта, если только они не были проконсультированы лицами, несущими ответственность за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с креслом во время его работы.
- Если провод поврежден, то, во избежание несчастного случая, он должен быть заменен представителем сервисной службы компании дилера.


### 5. Техническое обслуживание.

- Техническое обслуживание продукта должно осуществляться только специалистом службы сервиса компании дилера. Пользователям строго запрещается разбирать массажное кресло самостоятельно.
- Не забудьте отключить питание после использования кресла.
- Не используйте кресло, если разъемы неисправны.
- Если вы не пользуетесь креслом в течение длительного периода времени, сверните все шнуры и храните его в сухом чистом помещении.
- Не подвергайте кресло воздействию высоких температур, не храните рядом с огнем или под прямыми солнечными лучами.
- Если провод устройства поврежден, то, во избежание несчастного случая, он должен быть заменен представителем службы сервиса компании дилера.
- Используйте только сухую тряпочку для очистки кресла. Запрещено использование растворителя, бензола или спирта.
- Механические части кресла были специально разработаны и не требуют особого ухода.
- Избегайте контакта кресла с острыми предметами.
- Не передвигайте кресло по неровной поверхности, вначале поднимите его.
- Используйте кресло с перерывами; не оставляйте продукт включенным надолго.


### 6. Устранение стандартных неисправностей.

- Мотор может звучать во время работы.
- Если пульт управления работает не правильно, проверьте соединение сетевого кабеля и убедитесь, что питание включено.
- Если установленное время массажа вышло, питание будет автоматически отключено; если кресло работает в течение длительного промежутка времени, сработает предохранитель, и питание также автоматически отключится, после этого следует включать кресло не ранее, чем через полчаса.

## Наименование и функции основных компонентов

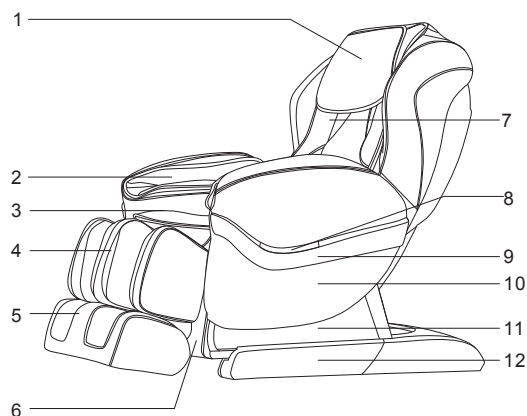

1. Подголовник
2. Воздушные подушки для рук
3. Подушка сидения
4. Подставка для ног
5. Массажер для стоп
6. Передняя перегородка
7. Подушка для спины
8. Светодиодная подсветка
9. Декоративная полоска
10. Подлокотники
11. Боковая крышка
12. Задняя крышка основания
13. Задняя крышка спинки
14. Пульт ручного управления
15. Крышка приводного устройства
16. Колесики
17. Сетевой кабель и электрическая вилка
18. Разъем сетевого кабеля
19. Коробка предохранителя
20. Переключатель питания
21. Разъем для пульта управления

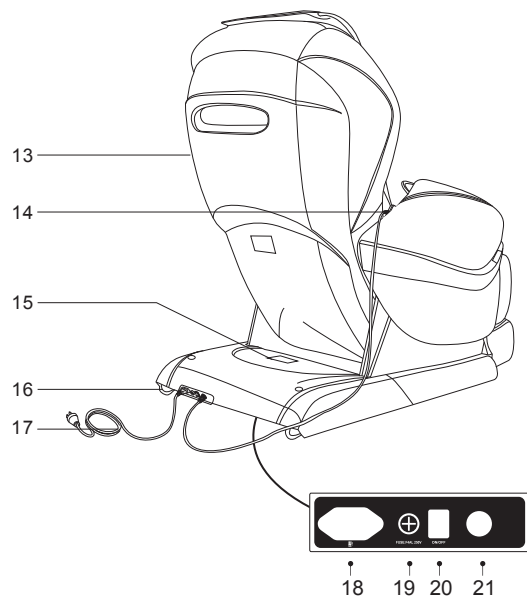


## Функции

### Функции :

- Оснащено четырьмя подвижными бесшумными массажными роликами.
- Имитирует различные массажные методики, такие как шиацу, разминание, быстрое постукивание, постукивание, одновременное разминание и быстрое постукивание.
- 5 функций автоматического массажа: успокаивающий, расслабляющий, компрессионный, массаж воротниковой зоны, массаж спины и поясницы.
- Оснащено тремя функциями памяти: M1, M2 и M3.
- 5 режимов ручного массажа верхней половины тела: частичный, точечный, полный, шея и плечи, спина и поясница. Каждый режим массажа имеет три уровня регулирования скорости. В режиме точечного массажа вы можете перемещать массажные ролики вверх или вниз; в режиме разминания, шиацу или постукивания вы можете регулировать расстояние между массажными роликами (широкое, среднее, узкое).
- Три режима воздушно-компрессионного массажа с тремя уровнями интенсивности: массаж всего тела, массаж рук (8 воздушных подушек), массаж ног (20 воздушных подушек).
- Функция подогрева спины: угольное волокно с инфракрасным нагревающим элементом.
- Голубая светодиодная подсветка с художественным эффектом на подлокотниках.
- Раздвижная подставка для ног, подходящая под любой рост.
- Откидывающаяся назад спинка. Возможно полное отклонение для оптимизации пространства.
- Кресло раскладывается с помощью сладер-механизма. Кресло выезжает вперед при помощи рельсовых направляющих, затем спинка опускается, а сидение поднимается, таким образом раскладывается в угол нулевой гравитации.
- Спинка кресла и подставки для ног могут автоматически подниматься одновременно.

## Правила эксплуатации

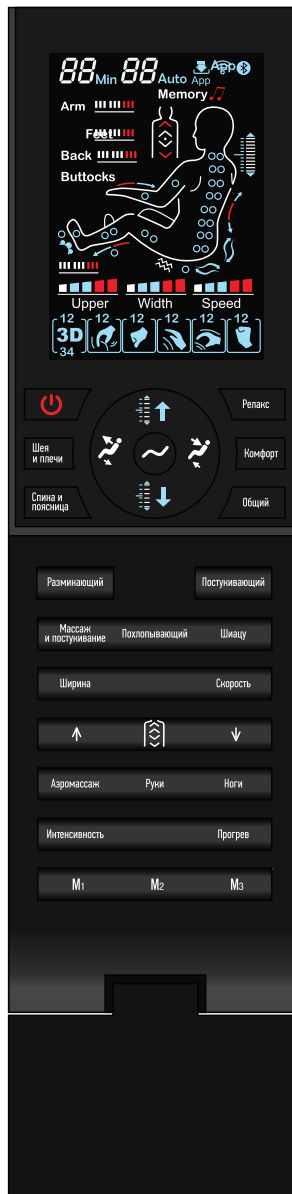

Примечание:  
Отображенные  
характеристики  
соответствуют  
настоящему  
составляющим  
частям кресла.

## Правила эксплуатации


### 1. Подключение к сети



### 2. Начало массажа

- Нажмите кнопку питания, спинка кресла автоматически откинется назад и начнется массаж.
- Начнется автоматический поиск положения плеч и акупунктурных точек, дождитесь окончания.
- Если положение массажных роликов отличается от реального расположения ваших плеч, отрегулируйте положение роликов вручную. Существует 10 уровней регулировки. Если не двигать массажные ролики, то в течение 10 секунд автоматически будет запущен массаж.

| Кнопка | Описание   | Отображение на дисплее |
|--------|--|------------------------|
|        | Передвижение массажных роликов вверх до подходящего положения. |                        |
|        | Передвижение массажных роликов вниз до подходящего положения   |                        |

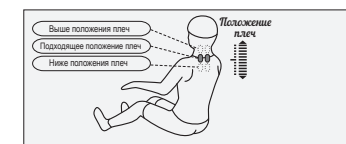

- Выберите необходимую функцию массажа
- Функция памяти  
выберите M1, M2 или M3, кресло вернется к сохраненным настройкам массажа.

| Кнопка         | Описание | Отображение на дисплее                     |
|----------------|----------|--|
| Функция памяти |          | Отображает сохраненные массажные настройки |
|                |          | Отображает сохраненные массажные настройки |
|                |          | Отображает сохраненные массажные настройки |

## Правила эксплуатации

- Описание функций автоматического массажа

| Функция                                  | Кнопка | Описание  | Дисплей |
|--|--------|---|---------|
| Описание функции автоматического массажа |        | Глубокое воздействие на акупунктурные точки, расслабление болезненного участка тела | Авто F1 |
|  |        | Расслабление мышц и скелета   | Авто F2 |
|  |        | Стимулирует кровообращение  | Авто F3 |
|  |        | Массаж плеч и шеи   | Авто F4 |
|  |        | Массаж спины и поясницы   | Авто F5 |

- Режим ручного управления, верхняя и нижняя части тела.

### 1) Массаж верхней половины тела

| Функция                              | Кнопка | Описание             | Дисплей |
|--------------------------------------|--------|----------------------|---------|
| Вид массажа                          |        | Скорость, расстояние |         |
|                                      |        | Скорость             |         |
|                                      |        | Скорость, расстояние |         |
|                                      |        | Скорость             |         |
|                                      |        | Скорость, расстояние |         |
| Скорость                             |        | 3 уровня скорости    |         |
| Расстояние между массажными роликами |        | 3 уровня расстояния  |         |

## Правила эксплуатации

| Функция                                 | Кнопка | Описание   | Дисплей                             |
|---|--------|--|-------------------------------------|
| Регулировка положения массажных роликов |        | Точечный массаж  | H0                                  |
|   |        | Массаж отдельной части тела (частичный массаж)                                   | H1                                  |
|   |        | Массаж верхней половины тела (полный массаж спины)                               | H2                                  |
|   |        | Массаж верхней половины тела (шея и плечи)                                       | H3                                  |
|   |        | Массаж верхней половины тела (спина и поясница)                                  | H4                                  |
|   |        | Положение массажных роликов регулируется в режиме точечного и частичного массажа | Перемещение массажных роликов вверх |
|   |        |  | Перемещение массажных роликов вниз  |

- Воздушно-компрессионный массаж

| Функция       | Кнопка | Описание                         | Дисплей     |
|---------------|--------|----------------------------------|-------------|
| Полный массаж |        | Воздушный массаж рук, ног и стоп | Arm<br>Feet |
| Руки          |        | Массаж рук                       | Arm         |
| Ноги          |        | Массаж ног и стоп                | Feet        |
| Интенсивность |        | 3 уровня интенсивности           | Arm<br>Feet |

- Другие функции ручного управления

| Функция           | Кнопка | Описание   | Дисплей |
|-------------------|--------|--|---------|
| Функция подогрева |        | Подогрев спины при помощи инфракрасного излучения, ощущение тепла наступает через 3 мин работы кресла<br>Подогрев спины при помощи инфракрасного излучения, ощущение тепла наступает через 3 мин работы кресла |         |




## Правила эксплуатации

- Другие функции ручного управления

| Функция   | Кнопка  | Описание  |
|---|---|---|
| Поднять спинку кресла                                       |  | Нажмите на кнопку и спинка кресла медленно начнет подниматься, а подставки для ног опускаться, отпустите кнопку, когда кресло достигнет желаемого положения. Если спинка поднимется до предела, она остановится, и раздастся звуковой сигнал. |
| Опустить спинку кресла                                      |  | Нажмите на кнопку и спинка кресла медленно начнет опускаться, а подставки для ног подниматься, отпустите кнопку, когда кресло достигнет желаемого положения. Если спинка опустится до предела, она остановится, и раздастся звуковой сигнал.  |
| Автоматическое приведение кресла в горизонтальное положение |  | Положение спинки будет меняться при каждом нажатии кнопки. Всего 3 положения.   |

### 3. Отключение питания, остановка массажа

- Нажмите красную кнопку во время массажа и все массажные функции остановятся, вы можете сохранить текущие настройки массажа. Спинка и подставка для ног автоматически вернуться в исходное положение. Если заданное время массажа истекло, массажные функции остановятся, но спинка и подставка для ног останутся в текущем положении.
- Функция запоминания: на экране пульта управления будет гореть надпись «Память», нажмите кнопку M1, M2 или M3, если вы хотите сохранить настройки. На экране загорятся соответствующие значки. Либо нажмите еще раз кнопку питания, чтобы полностью отключить кресло, при этом массажные ролики, спинка кресла и подставка для ног вернуться в исходное положение. Либо подождите в течение 10 секунд, и кресло отключится автоматически, спинка, подставка и массажные ролики также вернуться в исходное положение.

| Функция        | Кнопка  | Дисплей     |
|----------------|---|-------------|
| Функция памяти |  | SA 1 Memory |
|                |  | SA 2 Memory |
|                |  | SA 3 Memory |


## Правила эксплуатации

- Полное отключение питания кресла  
Рисунок (отключение питания)



### Примечание

- Во избежание травм, запрещается опираться на подставку для ног, во время работы массажного кресла, когда оно находится в горизонтальном положении с поднятой подставкой для ног, так как кресло может перевернуться.

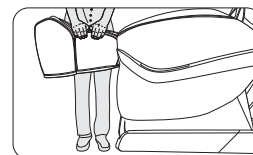

### 4. Установка подъемного механизма подставки для ног

- Откройте крышку (Рис. 1), включите кресло, вручную переместите спинку кресла в положение, как показано на Рис. 2.

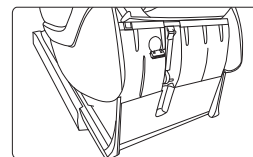


Рис. 1

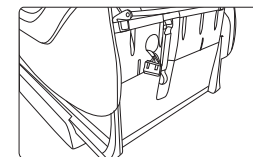


Рис. 2

- Вытащите подъемный механизм из сидения, выровняйте его с отверстием, вставьте фиксатор. (Рис.3)
- Установка закончена. (Рис.4)

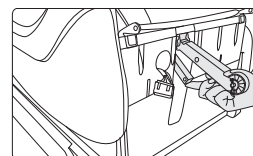


Рис. 3

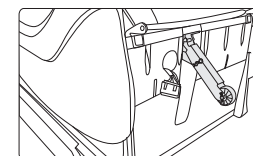


Рис. 4

## Правила эксплуатации

- После установки подъемного механизма, вручную верните спинку кресла в исходное положение (рис.5), установите подставку для ног.



Рис. 5

### 5. Установка подставки для ног

- Вначале установите торсионный вал на ось подставки, убедитесь, что отверстия выровнены относительно R-образной оси. (Рис.1)
- После того как подставка выровнена относительно оси, вставьте ее. (Рис.2)

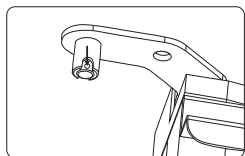


Рис. 1

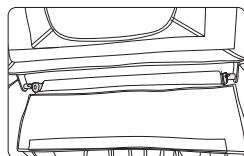


Рис. 2

- Закройте R-образную ось, затем проделайте вышеописанные действия с другой стороны. (Рис.3)
- Завершение установки. (Рис.4)

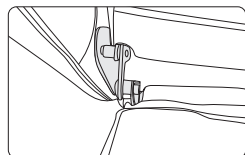


Рис. 3

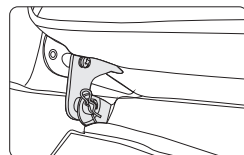



Рис. 4

### 6. Демонтаж подголовника и подушек для спины, правила их использования

Использование подушек может снизить интенсивность массажа, используйте подушки по необходимости. Подушка для спины присоединена к спинке кресла при помощи молнии (1), Подголовник и подушечки на спинке кресла присоединяются при помощи липучек (2).




Застежка-молния

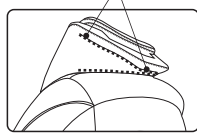

(1)

Липучки

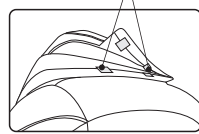


(2)

## Правила эксплуатации

### 7. Защита пола

Массажное кресло может повредить деревянный пол, поэтому лучше подстелить под него ковер или другой материал.

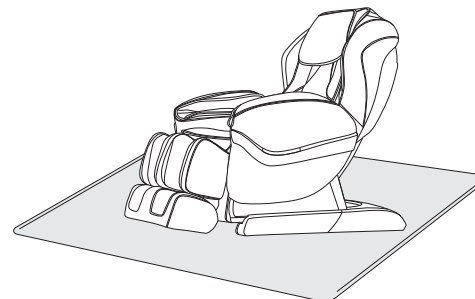


**ВНИМАНИЕ**

Не передвигайте кресло при помощи колесиков по деревянному полу, неровной поверхности или в узком помещении. Кресло следует поднять с двух сторон, взявшись за борозды на передней и задней крышке (Не поднимайте кресло только за подлокотники).

### 8. Способ передвижения кресла

Убедитесь, что вы подняли с пола все провода, наклоните кресло за спинку назад под определенным углом (центр тяжести должен приходиться на колесики), передвиньте кресло руками вперед или назад. Затем медленно и аккуратно верните кресло в исходное положение.

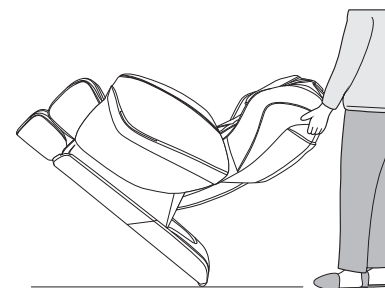

**ВНИМАНИЕ**

Перед тем как двигать кресло, отсоедините сетевой кабель и кабель пульта управления.



## Технические характеристики

Модель: RT-6310

Наименование: Массажное кресло

Допустимое напряжение: 220-240В ~ 50Гц/60Гц

Допустимая входная мощность: 150Вт

Допустимое время работы: 20 мин.

Уровень безопасности: Класс 1

Материалы: ПВХ, ПА, сталь, электрические и электронные части

| Материал | ПУ | Кожа | Ткань | Дерево |
|----------|----|------|-------|--------|
|----------|----|------|-------|--------|

## Гарантийный талон

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла «Sensa» компанией «Nordbass» в течение 3-х лет со дня продажи изделия. Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером или сервисным центром компании «Nordbass» в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии.

Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя массажного кресла и прекращается при смене владельца.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, компания «Nordbass» оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец массажного кресла.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки;
- нарушения правил эксплуатации;
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ;
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- использования изделия не по назначению;
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов;
- при эксплуатации изделия на коммерческой основе, или при общественном использовании, срок гарантии сокращается в 2 раза.

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляются за счет клиента.

Дата покупки \_\_\_\_\_ Наименование товара \_\_\_\_\_  
Компания - продавец \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
ФИО клиента \_\_\_\_\_

С правилами эксплуатации, противопоказаниями, и рекомендациями ознакомлен. Претензий не имею \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка)